

OM SYSTEM (旧オリンパス)
Tough TG-7

デジカメシステム
歴代販売数
第1位

無料貸出
実施中

NY-TGV スーパーアダプター

新機能


リモコンシャッター対応

ワイヤレスリモコンに対応しました

バイオ・サイエンス分野に

OM SYSTEM 製コンパクトデジカメ顕微鏡撮影システム **TG-7 スーパーシステム**
(旧オリンパス)

ワクワク させる、顕微鏡カメラ

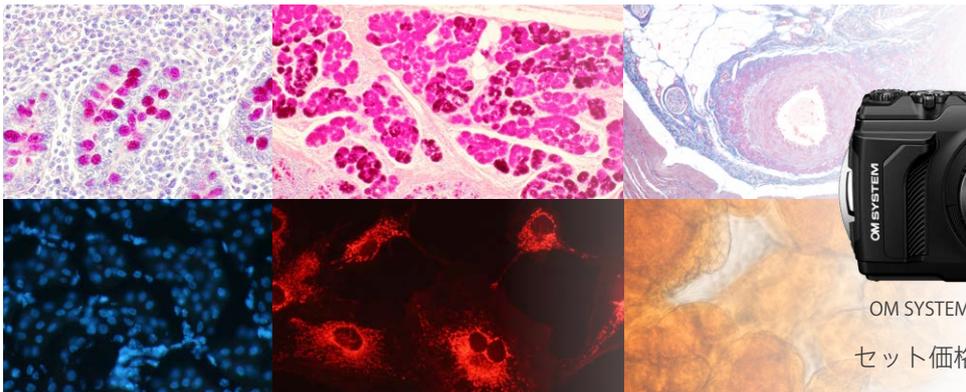

OM SYSTEM Tough TG-7

NY-TGV スーパーアダプター

セット価格：168,000円 税別 (184,800円 税込)

NY-TGV スーパーアダプター

新機能

リモコンシャッター対応

ワイヤレスリモコンに対応しました

産業・工業分野に

OM SYSTEM 製コンパクトデジカメ顕微鏡撮影システム **TG-7 スーパーシステム**
(旧オリンパス)

ワクワクさせる、顕微鏡カメラ



OM SYSTEM Tough TG-7

NY-TGV スーパーアダプター

セット価格：168,000 円 税別 (184,800 円 税込)

1. 簡単操作・簡単取り付け

デジカメならではの簡単操作に加え、アダプターとの脱着も手軽なバヨネット式。誰でも簡単に取り付け・撮影が可能です。

新機能


2. リモコンシャッター対応

Bluetooth リモコンシャッター（別売）に対応。静止画撮影、動画録画開始、ズーム操作も、カメラに触れずに手元で行えます。

新機能

3. USB-C 搭載

新世代規格 USB type-C を搭載。充電からPCへのデータ転送までケーブル一本で快適に行えます。※PCコントロールには対応していません

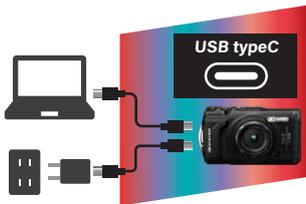

4. スマホ・タブレット操作/モニター出力対応

アプリを使ったライブカメラコントロールや、外部モニターへの出力（HDMI / 4K画質）が可能です。



5. ACアダプター対応

電池残量を気にせず使用できるACアダプター（別売）対応。※1



6. かんたん取説付き

取付からカメラの設定まで解説したオリジナル取説付き。



一般的な顕微鏡撮影システム

TG-7 スーパーシステム

- ・バッテリー内蔵
- ・ソフト不要
- ・PC不要
- ・リモコン対応
- ・タブレット操作可能

7. パソコン要らずだから、とことんシンプル

パソコンも、ソフトも、インターネットも必要なし。電源を入れて、シャッターを押すだけ。顕微鏡撮影装置として他にないシンプルさが魅力。

※1 HDMI外部映像出力と充電は同時にできません。給電しながらの撮影にはACアダプター F-5ACが必要です ※2 顕微鏡に取り付けた状態での使用は効果を得られません

8. 顕微鏡モード/深度合成モード搭載

カメラ単体で顕微鏡並の高倍率撮影が可能です。さらに手前から奥までピントの合った全焦点画像撮影機能も搭載。※2

OM SYSTEM(オリンパス)製コンパクトデジカメ顕微鏡撮影システム

TG-7スーパーシステム 一式 **168,000円** 税別
(184,800円 税込)

標準構成

設定済み・充電済み

OM SYSTEM製デジカメ Tough TG-7	76,000円 税別 (83,600円 税込)
SDHCメモリーカード (ハイスピードクラス10) 16GB	2,000円 税別 (2,200円 税込)
液晶観察用ミラー	サービス品
NY-TGVスーパーアダプター	90,000円 税別 (99,000円 税込)

標準構成内容



新製品	無料貸出	コンパクトデジカメ	1,200万画素	プログラムオート撮影	顕微鏡モード	リモコン	接眼部取付OK	Cマウント取付OK
実体顕微鏡 SMZ1TR SMZ745T 対応	4K動画	ACアダプター (オプション)	モニター出力 (HDMI)	モニター出力フレームレート 60fps*1	Wi-Fi Bluetooth	スマホタブレット	タイムラプス	フォーカスピーキング

おすすめオプション

リモコンシャッター RM-WR2	9,200円 税別 (10,120円 税込)
USB ACアダプター F-5AC*1	4,500円 税別 (4,950円 税込)

その他のオプション

BH用固定スリーブ NY-BH	5,000円 税別 (5,500円 税込)
直筒部固定スリーブ NY-JIS	5,000円 税別 (5,500円 税込)
5.5インチタッチスクリーンモニター DC-550PRO-M (HDMIケーブル付き)	29,800円 税別 (32,780円 税込)
ウルトラCマウント (EVIDENT(オリンパス)顕微鏡用)	18,000円 税別 (19,800円 税込)
HDMIケーブル (1.8m)	2,000円 税別 (2,200円 税込)

※デジカメ (TG-7) を含む、スーパーシステムの無料貸出 (1週間) を実施中です

※NY-TGVスーパーアダプターは単品でも販売しております。

※設定済み・充電済み…顕微鏡撮影モード (顕微鏡に取り付けて撮影する際の推奨設定であり、高倍率撮影モードのことはありません) に設定・充電を完了した上で出荷させていただきます。

9. 便利な小型タッチスクリーンモニター

オプションの小型タッチスクリーンモニター DC-550PRO-M (別売) があれば、見やすい位置にちょうどよいサイズのモニターを設置でき、観察がよりしやすくなります。※1

■ 顕微鏡用 5.5 インチタッチスクリーンモニター DC-550PRO-M



10. 業務用途に最適な高耐久性

防水・防塵・耐衝撃

(15m) (JIS/IEC 保護等級 6 級) (2.1m)

薬品を扱う研究室から、粉塵の舞う工場まで、さまざまな現場での業務使用に最適な高い耐久性。洗浄できる防水仕様で衛生面でも安心。



11. 歴代のTGシリーズに対応

NY-TGV スーパーアダプターは、すべての OM SYSTEM(オリンパス) 製 TG シリーズに対応しています。



顕微鏡への取り付け方法①		各種顕微鏡の Cマウント鏡筒 への取り付け方法			
オリンパス顕微鏡 (EVIDENT) の場合① 型式: U-OC オリンパス顕微鏡用 ウルトラCマウント 価格 18,000 円 税別 (19,800 円 税込) U-CMAD3+U-TV1X-2 の代わりに使用できます ①接眼との同焦点調整 ②中心軸調整が可能	オリンパス顕微鏡 (EVIDENT) の場合② 1 U-CMAD3 (オリンパス製) + 2 U-TV1X-2 (オリンパス製)	ニコン顕微鏡 の場合① 1 Cマウントダイレクト TVアダプター (ニコン製) + 2 Y-T TV 直筒 (ニコン製)	ニコン顕微鏡 の場合② 1 Cマウントダイレクト TVアダプター (ニコン製) + 2 LV-TV 直筒 (ニコン製)	ツァイス顕微鏡 の場合 1 60N-C1 1.0X	 液晶観測用ミラーサービス品 OM SYSTEM Tough TG-7 NY-TGV スーパーアダプター 接眼部/三眼部 どちらへも 取付可能 さらに詳しい取付方法
ライカ顕微鏡 の場合①② 1 Cマウントアダプター1x 2 Video/Photo 対物レンズ1x 3 CマウントアダプターHC1x					

※Cマウント鏡筒はレンズの入っていない1倍を使用してください

顕微鏡への取り付け方法②		各種スリーブを組み替えることで、顕微鏡のあらゆる鏡筒へ 取り付けできます			
接眼部への取付け 内径φ30mmの場合 内径φ23.2mmの場合 スーパースリーブ (付属品) 内径φ30 内径φ23.2 スーパースリーブ (付属品) を使用し内径φ30.0接眼部に取付できます 内径φ23.2の JIS規格接眼部に対応簡単に取付できます	JIS 直筒への取付け 直筒部固定スリーブ NY-JIS 価格: 5,000 円 税別 (5,500 円 税込) 内径φ23.2 外径φ25 内径φ23.2 外形φ25の JIS直筒部に対応。直筒部固定スリーブ(NY-JIS)でしっかり固定できます	オリンパス旧タイプ (BH 顕微鏡等) への取付 BH用固定スリーブ NY-BH 価格: 5,000 円 税別 (5,500 円 税込) 外径φ37.5 オリンパス製 BH 等の三眼鏡等に対応。BH用固定スリーブ(NY-BH)を併用ください	オリンパス製写真鏡筒 への取付け BH用固定スリーブ NY-BH 価格: 5,000 円 税別 (5,500 円 税込) 外径φ37.5 オリンパス製写真鏡筒に対応。BH用固定スリーブ(NY-BH)を併用ください	ニコン旧タイプ への取付け 最大内径φ42 オプチフォト ラボフォト メタフォト SMZ-2T等の三眼鏡筒部に直接取付できます	