



商品同梱のアンケートに答えるだけ!



# Good Job!

“彼”が、いい仕事をしてくれる

**垂直照明が明るく進化!**

垂直照明に**集光レンズ**が付きました  
集光効果で明るさは従来の**2倍**に!

実体顕微鏡用2重巻きLEDリング照明装置 <調光可><垂直照明付き>

# W-E PLUS

(ダブルEプラス)

明るい2重巻き照明。**垂直照明ユニット**により「もっと明るく、もっと先まで」を実現。



省スペース

電源直結  
コントローラー不要

調光機能付き  
VOL

垂直照明ユニット  
(ショートタイプ)

**大好評**  
※取り外し可能

<垂直照明付き><調光付き>

(ダブルEプラス)

実体顕微鏡用2重巻きLEDリング照明装置 **W-E PLUS**



価格 **21,000円 税別** (23,100円 税込)

# 1 さらに明るく

高輝度・白色LED球を2重に配列（54球+3灯）。圧倒的に明るく、シャープでクリアな純白色光が対象物をクッキリと照らし出します。0-100%の範囲で調光可能。目視観察、カメラ観察どちらにも最適。

# 2 もっと先まで

新発想「垂直照明ユニット」を標準装備。奥行きのあるサンプルの深部まで照らすことができます。高輝度LED3灯実装で光量も十分。着脱可能です。

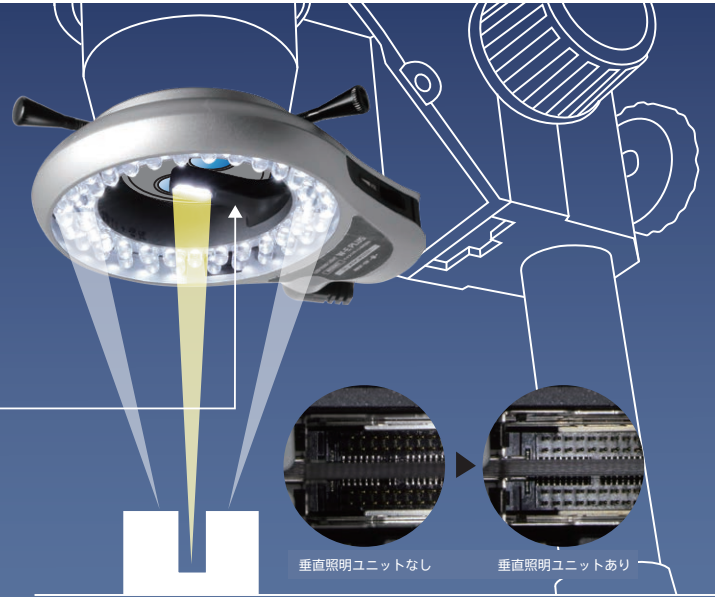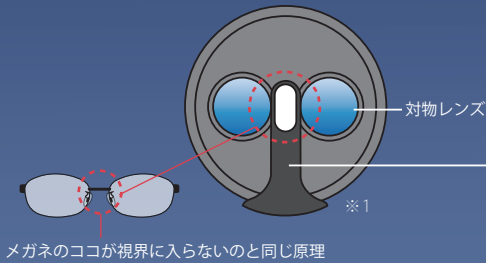

## 光路の隙間にもう一つの照明を配置

ニコン・オリンパス・ライカ・ツァイスなど主要な実体顕微鏡の光学系を独自分析。左右対物レンズの間で視界を極力妨げない最適位置を元に設計されています。

※1 ロングタイプはオプションです

# 3 豊富なオプションと長期保証

最長2年間保証

顕微鏡観察をさらに便利に快適にする充実の各種オプションを用意しております。さらに、最短即日出荷で修理完了品をお届けする「スピード修理対応保証」が付属。標準で最長2年間の安心の長期保証です。

**オプション** 大光量だから可能なフィルターワーク

透明保護/白色拡散/赤色/青色/温暖色

ワンタッチで脱着できる各種フィルター。54灯高輝度LED搭載のW-E PLUSなら、フィルター使用時の光量落ちも気になりません。

※5種セットは収納スタンド付き

**新製品** 自由自在にナナメ照明

リング照明用<自在>アダプター

**3D-AD**

価格：15,000円 税別 (16,500円 税込)

実体顕微鏡用2重巻きLEDリング照明装置<垂直照明対応><調光付き> W-E PLUS (ダブルEプラス)

構成：W-E PLUS本体 / ACアダプター / スピード修理対応保証書 / 垂直照明ユニット (ショートタイプ) **21,000円 税別 (23,100円 税込)**

オプション			
垂直照明ユニット (ロングタイプ) 型式 WW-LONG	3,000円 税別 (3,300円 税込)	乾電池電源 乾太 型式 TK-8	5,800円 税別 (6,380円 税込)
透明保護フィルター 型式 WP-CF	1,500円 税別 (1,650円 税込)	乾電池電源 乾太 (単三アルカリ乾電池8本付き) 型式 TK-8S	7,000円 税別 (7,700円 税込)
拡散板 (白色) 型式 WP-RS	2,000円 税別 (2,200円 税込)	オリンパス製 SZ シリーズ用アタッチメント 型式 SZ-AD	2,000円 税別 (2,200円 税込)
温暖色フィルター 型式 WP-WF	2,000円 税別 (2,200円 税込)	カートン製顕微鏡 (一部) 用アタッチメント 型式 C-AD	3,000円 税別 (3,300円 税込)
赤色フィルター 型式 S5-AF	2,000円 税別 (2,200円 税込)	6070-AD (取り付け径φ60~φ70用アタッチメント)	3,500円 税別 (3,850円 税込)
青色フィルター 型式 S5-BF	2,000円 税別 (2,200円 税込)	リング照明用<自在>アダプター 型式 3D-AD	15,000円 税別 (16,500円 税込)
フィルター5種セット (収納スタンド付) 型式 WP-OPP	8,000円 税別 (8,800円 税込)		

**必ずもらえるキャンペーン中**  
赤・青フィルター (税込4,400円のもの)

商品同梱のアンケートに答えるだけでプレゼント

取り扱い販売店

仕様	PSE認証済み
最大照度	50,000lux 以上
定格入力 / 出力電圧 (ACアダプター)	AC100V - 240V / 12V
点灯 / 調光方式	全点灯 / PWM (光量可変範囲 0-100%)
取り付け径	φ40mm - φ61mm (6070-AD 仕様時 φ60mm - φ70mm)
色温度	約 8,000K (温暖色フィルター仕様時約 5,000K)
消費電力	4W

無料貸し出しお申し込みはこちらからもどうぞ →  
QRコードを読み込んでフォームに入力するだけ

