

無料貸出
実施中

新製品

さらに明るく
もっと先まで

リニューアル / 新発売

実体顕微鏡用2重巻きLEDリング照明装置<垂直照明対応>

W-E PLUS

抜群に明るい2重巻き照明。垂直照明ユニットに対応したニューモデル

人気の定番製品W-Eを大幅リニューアル。価格はそのまま、新たに垂直照明に対応するなど大きな進化。



<W-E 後継モデル>

実体顕微鏡用2重巻きLEDリング照明装置<垂直照明対応> W-E PLUS

(ダブルEプラス)


定価 21,000 円 (税別)

1 さらに明るく

高輝度・白色LED球を2重に配列（54球）。圧倒的に明るく、さらにシャープでクリアーな純白色光が対象物を鮮明に照らし出します。

2 もっと先まで


新発想「垂直照明ユニット」を装着可能。観察が困難だった深部まで明るく照らします。高輝度LED3灯実装で光量も十分。着脱も簡単です。

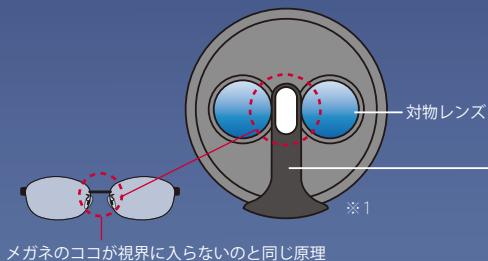

光路の隙間にもう一つの照明を配置

ニコン・オリンパス・ライカ・ツァイスなど主要な実体顕微鏡の光学系を独自分析。左右対物レンズの間で視界を極力妨げない最適位置を元に設計されています。

※1 ロングタイプはオプションです

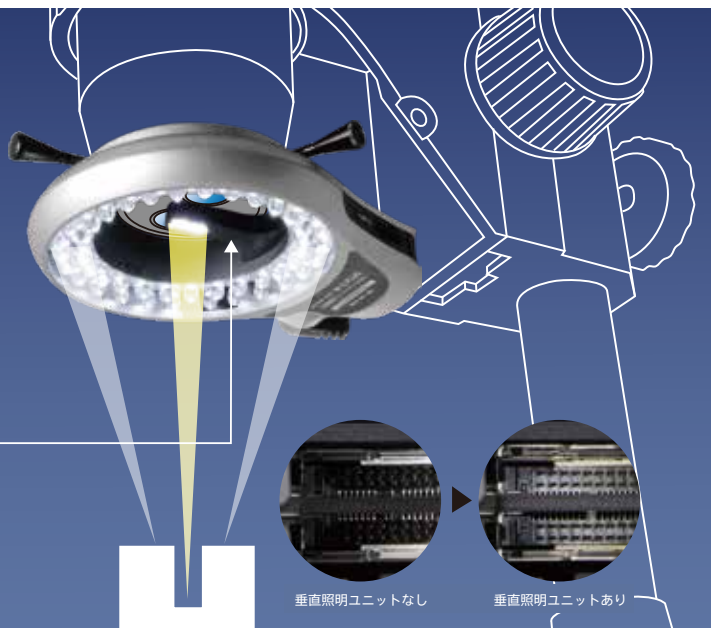

3 豊富なオプションと長期保証

顕微鏡観察をさらに便利に快適にする充実の各種オプションを用意しております。さらに最長2年間の長期保証（スピード修理対応）が標準付属。不具合品発送後、**最短3日以内**に修理完了品をお届けいたします。

十分な光量だから可能なフィルターワーク



透明保護/白色拡散/赤色/青色/温暖色

54灯高輝度LED搭載のW-E PLUSなら、フィルター使用時の光量落ちも気になりません。

電源の無い場所でも使える！

単三電池 8本収納 / 乾太 KANTA



単三乾電池駆動にできる新オプション。顕微鏡の移動が手軽に。

実体顕微鏡用2重巻きLEDリング照明装置<垂直照明対応> W-E PLUS (ダブルEプラス)

構成 W-E PLUS 本体 / ACアダプター / スピード修理対応保証書

発売記念サービス中

垂直照明ユニット(ショートタイプ)

21,000円 (税別)

オプション

垂直照明ユニット (ロングタイプ) 型式 WV-LONG	3,000円 (税別)	フィルターブレイ (全5種フィルターセット・収納スタンド付き) 型式 WP-OFP	8,000円 (税別)
透明保護フィルター 型式 WP-CF	1,500円 (税別)	乾電池電源 乾太 型式 TK-8 NEW	5,500円 (税別)
拡散板 (白色) 型式 WP-RS	2,000円 (税別)	乾電池電源 乾太 (単三アルカリ乾電池8本付き) 型式 TK-8S NEW	7,000円 (税別)
赤色フィルター 型式 WP-AF	2,000円 (税別)	オリンパス製 SZ シリーズ用アタッチメント 型式 SZ-AD	2,000円 (税別)
青色フィルター 型式 WP-BF	2,000円 (税別)	カートン製顕微鏡 (一部) 用アタッチメント 型式 C-AD	3,000円 (税別)
温暖色フィルター 型式 WP-WF	2,000円 (税別)	6070-AD (取り付け径φ60~φ70用アタッチメント)	3,500円 (税別)

取り扱い販売店

仕様	PSE認証済み
最大照度	50,000lux 以上
定格入力電圧	AC100V - 240V
点灯方式	全点灯
調光方式	PWM (光量可変範囲 0-100%)
取り付け径	φ40mm - φ61mm (6070-AD 仕様時 φ60mm - φ70mm)
色温度	約 8,000K (温暖色フィルター仕様時 約 5,000K)
消費電力	4W

※ 垂直照明ユニットは特許・意匠申請中です

無料貸し出しお申し込みはこちらからもどうぞ →
QRコードを読み込んでフォームに入力するだけ

